

PROTOCOLLO DEL SISTEMA CLINICO




- 1** Identificare la posizione del condilo tramite palpazione, tracker digitale, cefalometria laterale e HV CBCT. Fare un piccolo segno sulla pelle o utilizzare un marcatore radiografico.




- 2** Istruire il paziente a stare in piedi o sedersi, assicurandosi che la sua testa sia all'altezza degli occhi.



- 3** Spostare i capelli del paziente per identificare l'Otobasion Superius destro (dove poggiano gli occhiali sull'orecchio) e l'Exocanthion destro (l'angolo dell'occhio).

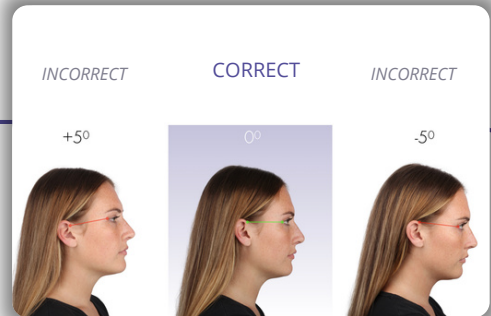


- 4** Allineare l'orientamento craniale a 0 gradi orizzontali utilizzando i punti di riferimento del paziente.

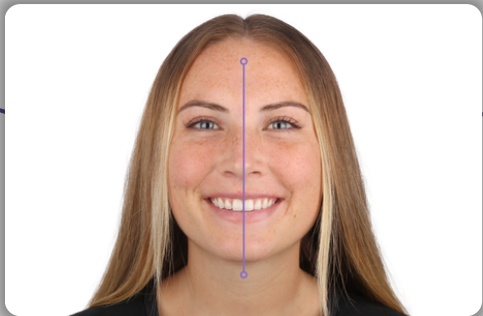


- 5** Identificare la linea mediana facciale.




- 6** Allineare le guide sulla placca occlusale con la linea mediana facciale. Assicurarsi di registrare quante più impronte possibili del modello occlusale, con il margine incisale che tocca le guide.

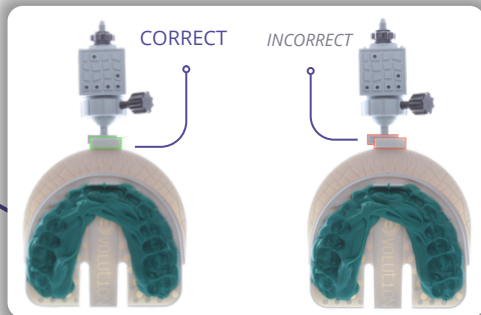


- 7** Fissare il cubo digitale o analogico sulla parte anteriore dell'arco OneBite. Assicurarsi che scivoli completamente. Spingere fermamente il connettore nell'arco e confermare che non vi sia più spazio per spingere ulteriormente.

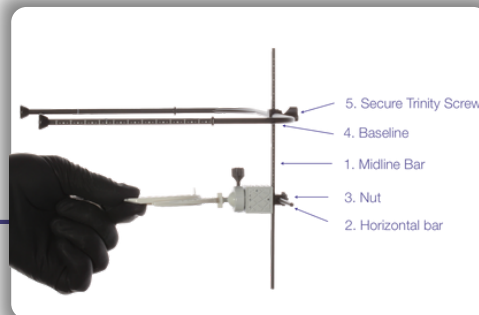


- 8** Collegare la barra della linea mediana, la barra orizzontale e la linea di base al cubo. Seguire l'ordine corretto per assemblare il sistema.

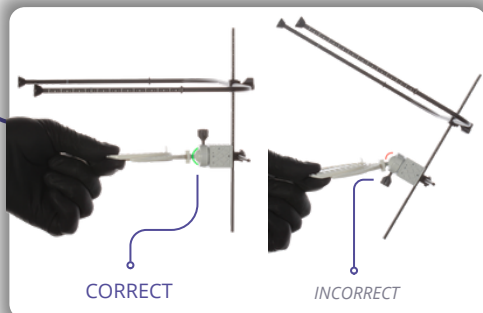


- 9** Fissare l'anello sul cubo, in modo che il sistema possa essere micro-regolato prima di inserirlo nella bocca del paziente.

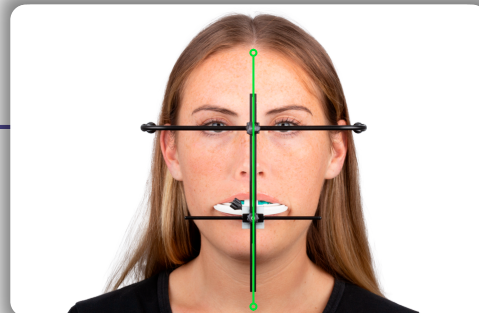


- 10** Allineare la barra della linea mediana con la linea mediana facciale.

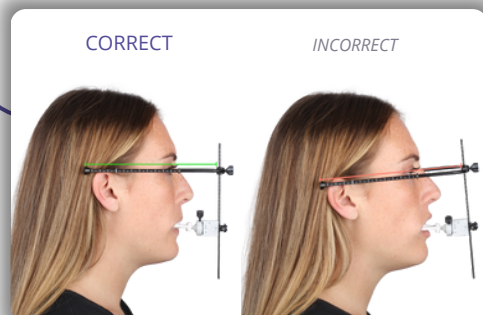


- 11** Sul lato destro del viso del paziente, allineare la linea di base parallelamente ai due punti di riferimento, l'angolo dell'orecchio (otobasion superiore destro) e l'angolo dell'occhio (esocantionio destro).

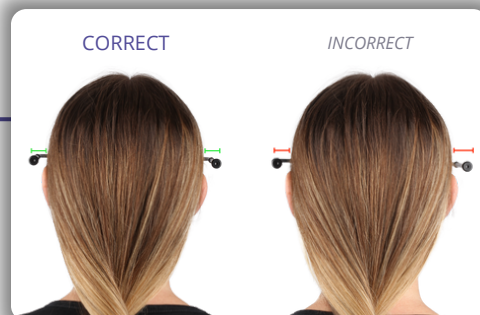


- 11a** Confermare la distanza uniforme delle barre della linea di base su entrambi i lati della testa. Verificare guardando il retro della testa del paziente.

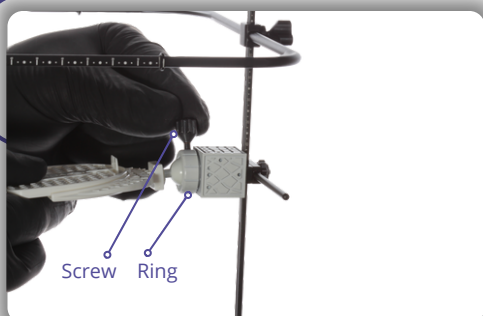


- 12** Una volta allineato tutto, fissare il record ruotando l'anello verso destra spingendo la vite. Una volta fissato l'anello, stringere la vite per bloccare il record.

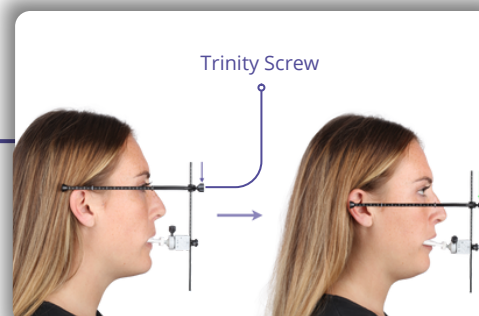


- 13** Svitare la vite trinarria davanti alla linea di base e abbassarla per allinearla con il segno o il marcatore radiografico posto direttamente sul condilo.

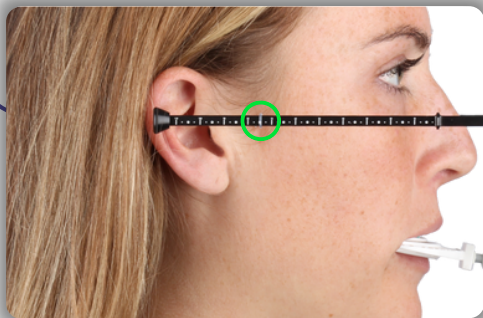


- 14** Posizionare l'elastico trasparente sul numero della linea di base (Z) parallelo al marcatore del condilo.

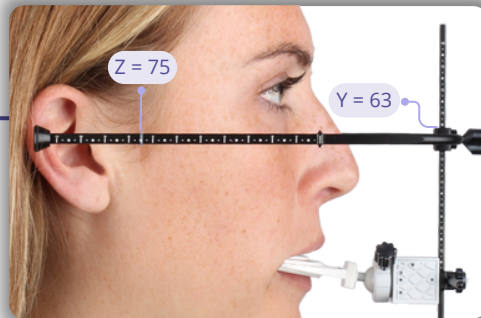


- 15** Registrare il numero della linea mediana (Y) sopra il connettore della barra della linea di base. Documentare i numeri Z e Y del record.

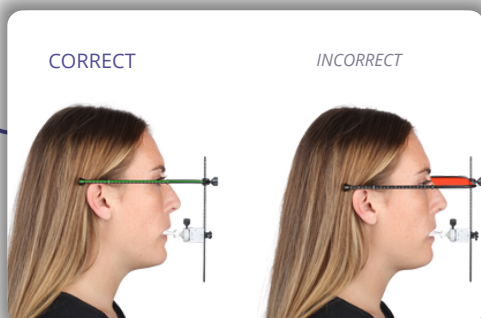

- 16** Scattare foto dal lato destro della testa del paziente a 0 gradi, mantenendo la fotocamera allineata alla linea di base.

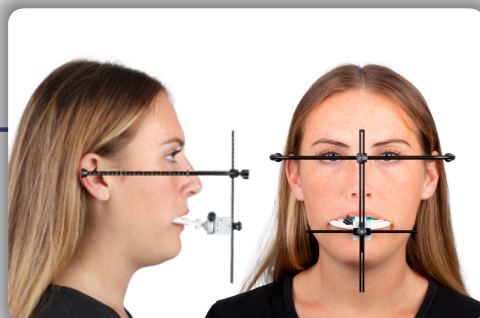


- 17** Inviare al laboratorio o al centro digitale una foto laterale e una foto frontale della testa del paziente, assicurandosi che i valori Z e Y siano registrati correttamente per un corretto montaggio del caso.

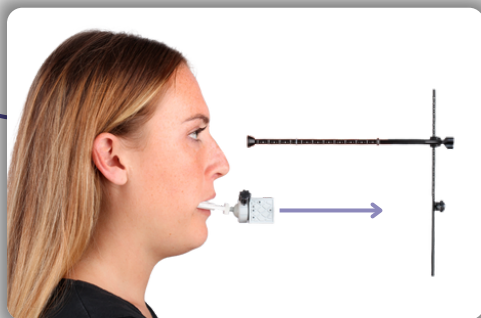

- 18** Svitare il dado anteriore per staccare le barre dal cubo.



- 19** Rimuovere la placca occlusale OneBite con il cubo dalla bocca del paziente come un unico pezzo.

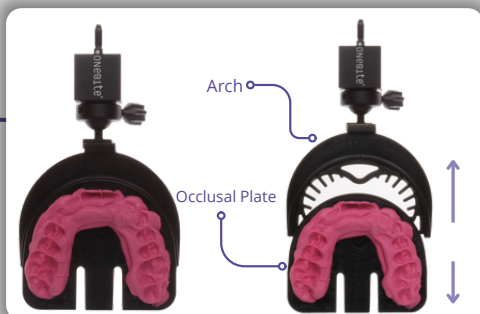

- 20** Per il cubo analogico nero, seguire il protocollo analogico. Rimuovere la placca occlusale dall'arco, disinfettare il cubo con spray disinfettante. NON AUTOCLAVARE e spedire al laboratorio.



- 21** Per il cubo digitale, seguire il protocollo digitale. NON AUTOCLAVARE il cubo.


PROTOCOLLO DIGITALE DEL SISTEMA CLINICO



- 1 Assicurarsi che l'impostazione dell'intelligenza artificiale sullo scanner intraorale digitale sia disattivata e impostata in modalità HD.




- 2 Acquisire scansioni digitali dell'arcata superiore, dell'arcata inferiore e del morso del paziente utilizzando lo scanner intraorale.

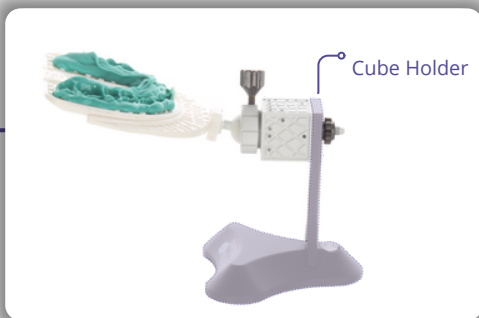

- 3 Utilizzare il supporto del cubo digitale per fissare il cubo prima della scansione.



- 4 Con lo scanner intraorale, eseguire la scansione delle tre facce del cubo. Procedere dal cubo e avanzare con lo scanner verso la placca oclusale OneBite per acquisire le informazioni del modello oclusale. Se si verificano difficoltà nel catturare la connessione dell'articolazione a sfera con l'arco, utilizzare il cappuccio di scansione.

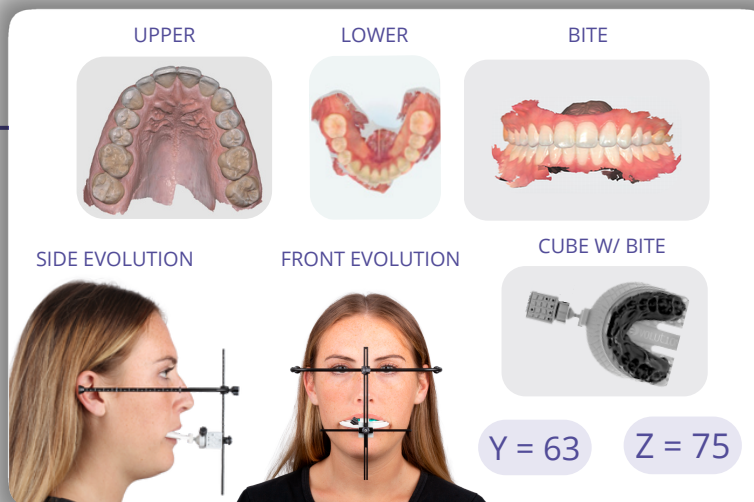

- 5 Inviare i seguenti record al laboratorio o al centro digitale per l'elaborazione: valore della linea di base (Z), valore della linea mediana (Y), quattro scansioni (arcata inferiore, arcata superiore, morso, Cubo OneBite), foto della vista frontale e laterale del paziente con il OneBite Evolution nella posizione corretta. Per l'utilizzo dell'Adattatore di Montaggio Digitale OneBite Evolution, inviare al centro digitale tramite il nostro sito web.